



MyEye 2 product Informatie.



Afmetingen:

76 x 21 x 14,9 mm/
3 x 0,83 x 0,59 in

Gewicht: 22,5
gr/0,79 Oz

**Apparaat &
Doos:** 553 gr /
19.5 oz

Accu
3.7 V DC,
nominale 320mAH

Camera
13 megapixelcamera

Geschikt voor mensen met een visuele beperking.

Wat is OrCam MyEye 2?

OrCam MyEye 2 is een onopvallende, draagbare en intelligente camera die:

- Gedrukte tekst omzet in spraak (zowel nabij als veraf)
- Gezichten herkent
- Voorwerpen herkent
- Barcodes leest (en kan bijleren)
- Bankbiljetten herkent (€, \$, £)
- Kleuren herkent
- De tijd aangeeft
- Leest in 2 talen: Nederlands/Engels (andere talen zijn ook mogelijk)

Verder:

- Bluetooth verbinding met randapparatuur (b.v. oortelefoontje) mogelijk
- Combinatie met BT gehoorapparaat mogelijk
- Geen Wi-Fi verbinding nodig
- Ingebouwde trainingsmodus

Hoe is de OrCam te bedienen?

De OrCam-gebruiker kan beslissen of hij:

- Een hele pagina met tekst wil lezen
- Een alinea met tekst wil lezen
- Een afzonderlijke regel tekst wil lezen
- Tijdens de leessessie kan de gebruiker pauzeren, vooruit- en achteruit scrollen in tekst.

Voor alle functies instellingen hoeft u alleen maar op de OrCam te tikken, over de aanraakbalk te vegen, of te wijzen naar de tekst of het voorwerp.


Waarom kiezen voor OrCam MyEye 2?

1. OrCam is het enige voorleesapparaat dat aan een brilmontuur kan worden bevestigd. De gebruiker heeft op deze manier altijd toegang tot gedrukte tekst (van papier of display), onafhankelijk van de locatie en met volledige privacy.
2. OrCam is een lichtgewicht en mobiel te gebruiken hulpmiddel dat mensen met een visuele beperking of andere leesproblemen mogelijkheden biedt op de werkplek, bij de studie of in hun eigen persoonlijke omgeving.
3. De OrCam MyEye heeft verschillende extra handige functies die de onafhankelijkheid in het dagelijks leven kunnen verbeteren.



Overzicht van functies.

1. Lezen

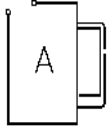

Gebruik ofwel automatische tekstherkenning, tik op de aanraakbalk, of wijs naar de tekst om het lezen te activeren.

2. Gezichtsherkenning



Sta recht voor de persoon die u wilt inprogrammeren (1m afstand en goed licht!). Leg uw vinger op de aanraakbalk en houd deze vast. Volg de gesproken instructies.

3. Barcode herkenning



Door middel van automatische herkenning. Houd het product voor u, draai het rond totdat de barcode wordt herkend.

4. Barcode leren



Om onbekende barcodes op te slaan houdt u de barcode voor u en legt u uw vinger op de aanraakbalk. Volg dan de gesproken instructies.

5. Kleur herkenning



Leg uw vinger op het voorwerp of oppervlak waarvan u de kleur wilt weten. Laat uw vinger erop liggen totdat de kleur genoemd wordt.

6. Herkenning van bankbiljetten

Houd het bankbiljet voor u. Met de automatische herkenning, aanwijzen of tikken wordt de waarde van het bankbiljet genoemd.

Overzicht van Functies.




7. Horloge-gebaar

Til uw hand en pols voor uw gezicht (alsof u op een horloge kijkt) om de tijd en datum te horen.

8. Leest in twee talen

Leest in 2 talen: Nederlands en Engels (andere talen ook mogelijk).

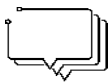

9. Spraak opdrachten (nog niet in NL!)

Dubbeltik op de aanraakbalk. Wacht op het signaal en spreek de opdracht uit.



10. Bluetooth- connectiviteit

Ga in het instellingen menu (verbinding maken) om verbinding te maken met een speaker of hoofdtelefoon.



11. Wi-Fi-updates

Sluit de oplader aan op het lichtnet en uw OrCam en log in op de computer voor automatische updates

www.orcham.com/nl/wifiset/



Lezen.

1) Automatisch lezen

Bij automatisch lezen kan OrCam tekst lezen zonder aanwijzing of tik op de aanraakbalk. Kijk gedurende enkele seconden (in te stellen in het hoofdmenu) naar de tekst en OrCam zal automatisch beginnen met het voorlezen van alle tekst welke zich binnen het bereik van de camera bevindt. De camera heeft een hoek van 80°. Dit betekent dat OrCam op een afstand van ongeveer 45cm een heel A4 of 2 pagina's van een boek kan overzien.

2) Lezen door aantikken

Door de aanraakbalk licht aan te tikken geeft u OrCam de opdracht een leessessie te beginnen. Alle tekst binnen het bereik van de camera wordt voorgelezen.

3) Lezen door aanwijzing

Wijs met een omhoog gerichte wijsvinger naar de tekst. Wacht op het dubbele piepsignaal dat aangeeft dat OrCam uw vinger heeft herkend. Haal uw vinger weg voor de tekst. OrCam leest nu de tekst die u hebt aangewezen.

4) Lezen door aanraking

Leg uw vinger op de tekst en laat deze liggen. Wacht een ogenblik en OrCam zal ongeveer 1cm boven uw vinger beginnen met lezen. Schuif uw vinger over de pagina naar een ander gedeelte van de tekst en OrCam volgt uw vinger.



Gezichtsherkenning.

Om dit gezicht op te slaan: Houd deze pagina voor u, leg uw vinger op de aanraakbalk en volg de gesproken instructies van de MyEye 2.



Kleurherkenning.

Leg uw vinger op het object of oppervlak waarvan u de kleur wilt weten. Laat uw vinger liggen en wacht tot OrCam de kleur heeft genoemd.



Barcode herkenning.

Hou het product voor uw gezicht en draai het rond. Wacht tot de OrCam de barcode automatisch heeft herkend en de produktinformatie noemt. Of wijs naar de barcode en wacht tot de produktinformatie wordt genoemd.



Barcode programmeren.

Richt de camera op de barcode. Leg uw vinger op de aanraakbalk en laat deze liggen. Volg daarna de gesproken instructies.

Talen.

OrCam leest zowel Engels als Nederlands (andere talen zijn ook mogelijk). Door het inschakelen van de automatische taalherkenning leest OrCam automatisch in Engelse of Nederlandse teksten zonder dat u instellingen hoeft te wijzigen.

OrCam reads both English and Dutch (other languages are also possible). By enabling automatic language recognition, OrCam automatically reads English or Dutch texts without the need to change settings.

OrCam accessoires.



OrCam- oortelefoons. Onderweg naar je OrCam luisteren

- Persoonlijke oortelefoon voor lawaaierige omgevingen
- Volledige privacy verzekerd bij het gebruik van uw OrCam MyEye of OrCam MyReader
- Eenvoudige Bluetooth-verbinding uw OrCam
- Tot 6 uur accuduur bij continue gebruik
- Ondersteunt slaap-en energiebesparingsmodus op uw apparaat
- Micro-USB- oplaad poort



OrCam **charge me.** **Gebruik je OrCam onderweg**

- Quick charger voor OrCam MyEye en OrCam MyReader
- Biedt 4 volledige laadcycli voor maximaal 10 uur continu gebruik van uw OrCam
- Ingebouwde riemclip voor draagcomfort
- Lichtgewicht en compact ontwerp
- USB naar type C oplaadpoort

orcam.com

FAQ'S.

- **Wat is gedekt in de OrCam-garantie?**

De garantie van OrCam MyEye dekt fabrieksfouten in software en materialen. De garantie is 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Voor de duur van de garantie biedt OrCam gratis software-updates. Voor volledige informatie over de garantie van OrCam raadpleegt u de gebruikershandleiding in het gebruikersgedeelte van de website van OrCam.

Omvat geen accidentele schade door eigen toedoen!

- **Wat is het proces wanneer OrCam niet goed werkt?**

Neemt u hiervoor contact op met uw leverancier. Uw OrCam wordt ter beoordeling teruggestuurd naar de fabriek. OrCam bepaalt of probleem onder de garantie valt of dat de gebruiker verantwoordelijk is voor reparaties en verzending.

- **Wie kan een demo van de OrCam verzorgen?**

Alleen een gecertificeerde OrCam distributeur, wederverkoper of trainer. Zelftrainings hulpmiddelen zoals instructievideo's en gebruikershandleidingen zijn beschikbaar op de website van OrCam.

- **Hoeveel geheugen heeft een OrCam?**

De OrCam heeft voldoende intern geheugen om 100 gezichten, 200 voorwerpen en 100 barcodes op te slaan.

FAQ'S.

- **Moet ik de batterij opladen?**

De batterij is oplaadbaar en de gebruiksduur is maximaal 2 uur bij continu gebruik. Laadt in 40 minuten vol met een USB-kabel. De OrCam ChargeMe met ingebouwde riemclip en een Power Pack zijn ook beschikbaar.

- **Hoe vindt de camera tekst?**

De camera zoekt naar teksten in het frame. Het analyseert het beeld volgens een algoritme waarmee de camera onderscheid kan maken tussen relevante en niet-relevante gegevens.

- **Kun je de OrCam gebruiken als je blind bent?**

Ja, OrCam MyEye is geschikt voor elke oogaandoening en bij elke gezichtsscherpte. Maar OrCam MyEye verbetert het gezichtsvermogen niet! OrCam helpt mensen die visueel gehandicapt of blind zijn om tekst te lezen en dagelijkse taken uit te voeren, zoals winkelen en het lezen van post.

- **Hoe wordt OrCam op mijn bril bevestigd?**

OrCam MyEye clips passen op bijna elk brilmontuur door het monteren van een eenvoudig te bevestigen magneetadapter.

OrCam past niet op wrap around monturen of monturen met zeer dunne draadframes. Indien de gebruiker niet brildragend is, wordt OrCam geleverd met een standaard brilmontuur.

FAQ'S.

- **Internet**

OrCam MyEye heeft geen internetverbinding nodig om te kunnen werken. Dit zorgt voor constant gebruik waar u ook bent en zorgt tevens voor volledige privacy van uw informatie.

OrCam MyEye maakt alleen verbinding met het internet om de eigen software te bijwerken.

- **Regen /waterdicht**

U kunt OrCam MyEye gebruiken in lichte regen of sneeuw (OrCam is spatwaterdicht maar niet waterbestendig).

- **Updates**

Als u uw OrCam wilt updaten, hoeft u alleen maar in te pluggen en verbinding te maken met uw Wi-Fi-netwerk. Wanneer er een nieuwe softwareversie beschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload.



Disclaimer.

OrCam MyEye, de meest geavanceerde draagbare ondersteunende technologie, biedt onafhankelijkheid door toegang tot visuele informatie toe te staan, overgebracht door audio, op een kleine camera die kan worden bevestigd aan bijna elk brilmontuur. Met behulp van kunstmatige intelligentie, leest het tekst, herkent gezichten, identificeert producten en meer. OrCam's maken de toegang tot visuele informatie hoorbaar. Het verbetert het gezichtsvermogen niet. Gebruik maken van de OrCam vereist dat de gebruiker de controle over zijn hoofd en handen heeft, en kan horen (met of zonder gehoorapparaten).

