



Comfortabel zicht, groter contrast, maximale bescherming



STERKTE BEREIK: -8 tot +8

ADDITIE: 0.75 – 6.00

MATERIAAL: CR39

FILTER: ML Filter C1

COATING: ML Prima

TYPES: Single Vision, Bifocaal en Multifocaal

Mensen met AMD (leeftijds gebonden Macula Degeneratie) hebben vaak problemen in het vinden van een optisch hulpmiddel welke hen écht helpt om significant beter te kunnen zien. Meestal wordt hen de standaard mogelijkheden geadviseerd, wat misschien iets helpt. Echter een oog met Macula Degeneratie heeft meer nodig dan alleen sterkte correctie. Er is een product wat meer biedt dan de standaard optiek en dat is AMD Comfort van Multilens.

AMD Comfort van Multilens biedt mensen met Macula Degeneratie een concept, welke eenvoudig is toe te passen en welke niet moeilijk is om voor te schrijven.

AMD COMFORT – EEN SPECIAAL KUNSTSTOF GLAS

AMD Comfort is een speciaal ontworpen kunststof glas voor mensen met Macula Degeneratie. Het glas bestaat uit 4 kenmerken:

COMFORT FILTER

Een speciaal ontworpen comfort filter welke 100% beschermt tegen UV-licht. Dit comfort filter houdt het blauwe licht substantieel tegen, maar behoudt de verdere functionaliteiten van het glas en zorgt ervoor dat je de natuurlijke kleuren kunt blijven zien.

VERGROTING

AMD glazen bieden een vergroting, welke genoeg is om het verschil te maken voor de drager van de glazen, maar welke niet te groot is waardoor het gezichtsveld verminderd zal worden. De vergroting is gemaakt met een speciale slijptechniek, waardoor het glas iets gecurved is en wat dikker wordt gemaakt.

Er zijn 2 vergrotingen mogelijk, AMD-I en AMD-II. AMD-I biedt een balans tussen cosmetisch uiterlijk en vergroting, AMD-II biedt meer vergroting waardoor het glas dikker is. AMD-I heeft een vergroting van ongeveer 3%, AMD-II heeft een vergroting van ongeveer 6%. De exacte vergroting is afhankelijk van het voorschrift en de selectie van het glas.

ONTSPIEGELING

Superontspiegeling zit standaard in de AMD comfort glazen, het verbetert het comfort en vermindert de verblinding.

INDIVIDUELE CORRECTIE

Wanneer een persoon niet normaal kan zien zal er eerst gecheckt moeten worden of dit op te lossen is met normale correctie. Hetzelfde geldt voor de AMD patiënt. Eerst moet er gekeken worden welk voorschrift nodig is. Daarom worden alle AMD comfort glazen voorzien van een individuele correctie, om het glas zo optimaal mogelijk te maken.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

De AMD comfort glazen bestaan uit een bewezen, optische techniek welke verpakt is in een product wat efficiënt is en welke door de opticiën simpel voor te schrijven is. Het kan zowel AMD patiënten als andere slechtziende mensen comfort bieden.

GEMAKKELIJK OM TE PROBEREN


Om de AMD comfort uit te proberen, zijn er passets gemaakt welke simpel te gebruiken zijn. Laat de patiënt het verschil ervaren met behulp van de AMD comfort Flip-up of met de AMD comfort Flirp welke voor een eigen bril gehouden kan worden.

GEMAKKELIJK TE BESTELLEN

Voor de opticiën geldt dezelfde bestelprocedure als bij een standaard glas.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

De gebruiker hoeft niet te wennen aan de AMD Comfort. De gebruiker zal direct kunnen profiteren van de voordelen van een beter contrast, betere visuele scherpte en beter comfort.

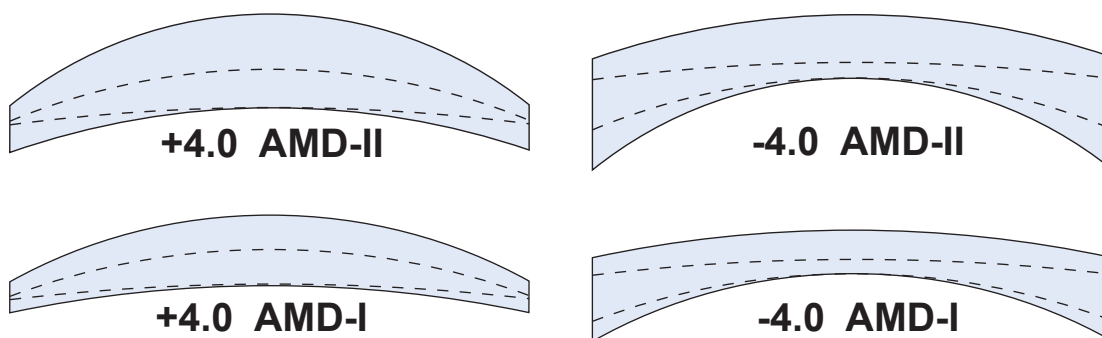

Tekening van de toenemende dikte van de AMD Comfort glazen.

AMD COMFORT GLAZEN

De glazen komen uit het programma van Multilens. Zij hebben een multifocaal glas, een enkelvoudig glas en een aantal bifocale glazen uitgekozen, welke goed samenwerken met AMD Comfort. Hieronder vindt u relevante informatie over AMD Comfort en over de glazen. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen (070-3836269) of de website www.slechtzienden.nl raadplegen.

AMD COMFORT MULTIFOCAAL

BASIS LENS:

ML Classic Comfort

AMD VERSIES:

AMD-I en AMD II

PASHOOGTE:

16 mm of 20 mm (20 mm wordt geadviseerd)

ADDITIE:

0.74 tot 4.00

TRANSITION: Ja

POLARISEREND: Ja

STERKTE BEREIK: Zie tabel

AMD COMFORT SINGLE VISION

BASIS LENS:

ML Classic Single Vision

AMD VERSIES:

AMD-I en AMD II

TRANSITION: Ja

POLARISEREND: Ja

STERKTE BEREIK: Zie tabel

AMD COMFORT BIFOCAAL

BASIS LENS:

ML Classic S28, ML Classic S28 High Addition, ML Classic C28

AMD VERSIES:

AMD-I en AMD II

ADDITIE:

0.74 tot 4.00 voor S28 en C28.

4.50 – 6.00 voor S28 High Addition

TRANSITION: Ja, voor C28

POLARISEREND: Ja, voor S28

STERKTE BEREIK: Zie tabel

CRITERIA VOOR AMD COMFORT GLAZEN

De hoofd criteria bij selectie van de glazen is:

MULTIFOCAAL

- Groot gezichtsveld
- Helder design
- Hoge additie is mogelijk
- Polariseratie en transition zijn mogelijk

BIFOCAAL

- Hoge addities zijn mogelijk
- Polariseratie en transition zijn mogelijk

SINGLE VISION

- Polariseratie en transition zijn mogelijk

AMD comfort lens	+ Sterkte	- Sterkte	Prisma
Multifocaal AMD I	+8	-8	4
Multifocaal AMD II	+6	-6	3
Multifocaal AMD I met pol of trans	+6	-6	4
Multifocaal AMD II met pol of trans	+4	-4	3
Single Vision AMD I	+8	-8	4
Single Vision AMD II	+6	-6	3
Single Vision AMD I met pol of trans	+6	-6	4
Single Vision AMD II met pol of trans	+4	-4	3
Bifocaal S28 AMD I, blank of pol	+8	-6	4
Bifocaal S28 AMD II, blank of pol	+6	-8	3
Bifocaal C28 AMD I, blank of transition	+8	-6	4
Bifocaal C28 AMD I, blank of transition	+6	-8	3
Bifocaal S28 High Add AMD I, blank	+8	-6	2
Bifocaal S28 High Add AMD II, blank	+6	-8	2

Sterkte limieten voor AMD Comfort glazen
Let op het volgende:

- Cilinder tot -6 kan gemaakt worden, zolang de maximum curve van het glas de -6 niet overschrijdt.
- Voor sterktes die buiten de boven genoemde limieten en vergroting vallen kunt u altijd contact met ons opnemen, wellicht is het wel mogelijk!
- Glazen tot 75mm (73 mm voor gepolariseerde glazen) kunnen gemaakt worden. Een grotere diameter is mogelijk, maar dan kan Myosoft vereisend zijn.
- Alle AMD glazen worden gemaakt in Index 1.5
- Maximum sferische + sterkte wordt beïnvloed door de additie.
- Bekijk het Multilens glasprogramma welke versies van polarisatie en transition mogelijk zijn.

AMD COMFORT TESTSETS

AMD COMFORT TEST BOX

2 paar grote AMD Comfort flip-ups (AMD-I en AMD-II) in een box.

**09050**

AMD-Comfort test box

AMD COMFORT TEST FLIP UPS

Grote flip-up met plano AMD-Comfort glazen.
Mogelijk met AMD-I en AMD-II.

**09003**

Grote flip-up met plano AMD-Comfort glazen

**09006**

Grote flip-up met plano AMD-Comfort glazen

AMD COMFORT FLIRP KIT

Een flirp met Plano AMD Comfort glazen,
1 paar met AMD-I en 1 paar met AMD-II.

**09036**

Een flirp met Plano AMD Comfort glazen